

Lemi[®]
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT



ENT
OFTALMOLOGIA
DENTISTICA

ENT
OPHTHALMOLOGY
DENTISTRY

DREAMED ZAK MOVE

DREAMED ZAK MOVE



COD. 333-111 MOVE


Dreamed Zak Move is ideal for diagnostics, ENT, dental and ophthalmic examinations. Thanks to its very low minimum height, the Dreamed Zak Move easily accommodates the patient. The back shape is specifically designed to approach the patient face. The base size is suitable also for small rooms. Different headrest options upon request. The practical move base helps with cleaning and disinfection of medical environments.

Dreamed Zak Move è ideale per visite diagnostiche, ORL, dentali e oftalmologiche. Grazie alla particolare altezza minima, Dreamed Zak Move permette al paziente di accomodarsi facilmente. La forma dello schienale è studiata in modo specifico per avvicinarsi al volto del paziente. L'ingombro della base è idoneo anche per le stanze piccole. Teste differenti su richiesta. La pratica base move facilita la pulizia e disinfezione dell'ambiente medico.


Focus on

- 4 electric motors for height, backrest, legrest and trendelenburg adjustment
- Move base with retractable wheels
- Pedal control with automatic reset function
- Entirely enclosed in ABS covering
- "Easy-to-clean" mattress without stitches
- Wide selection of class 1IM fire-resistant coverings
- Standard version including: anatomic mattress without stitches, zak headrest, back guides couple, Move base

- 4 motori elettrici per la regolazione completa di altezza, schiena, gambe e trendelenburg
- Base move con ruote integrate
- Pedaliera con azzeramento automatico
- Carter in ABS completamente chiuso
- Materasso senza cuciture "easy-to-clean"
- Ampia scelta di rivestimenti ignifughi classe 1IM
- La versione standard include: materasso anatomico senza cuciture, testa zak, coppia guide schienale, base Move

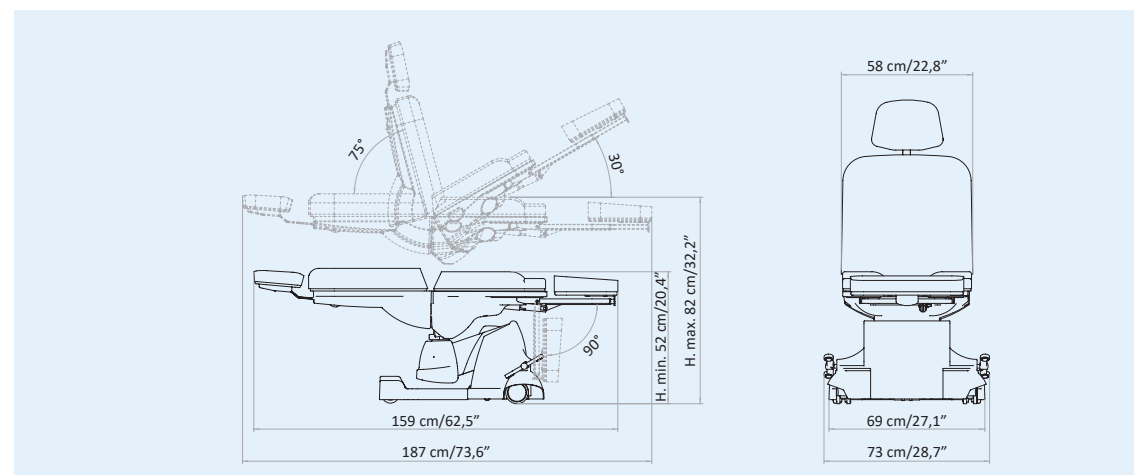

Packaging details

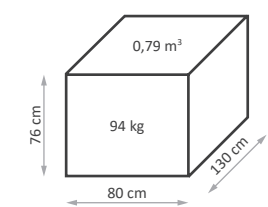

MAXIMUM CAPACITY
PORTATA MASSIMA
200 kg

MOVEMENTS

4 independent electric movements: height, backrest, legrest, trendelenburg
1 synchronized electric movement: backrest/legrest (only with handset control)
2 manual movements: head and extractable legrest
MOVE base with rolling wheels - Rotation **NOT available**
Automatic reset control to bring the couch back to the base position



Easy-to-clean anatomic
mattress without stitching
Materasso anatomico senza
cuciture per una facile
igienizzazione

52-82 cm
(21"-33")

Electric height
Altezza elettrica



30°

Electric Trendelenburg
Trendelenburg elettrico



MOVIMENTI

4 movimenti elettrici indipendenti: altezza, schiena, gambe, trendelenburg
1 movimento elettrico sincronizzato: schiena/gambe (solo con pulsantiera)
2 movimenti manuali: testa e gamba estraibile
Base MOVE con ruote integrate Rotazione **NON disponibile**
Comando di azzeramento automatico che riporta la poltrona nella posizione base



MOVE base with rolling wheels
Base MOVE con ruote integrate
Front wheels: Ø100 cm with brake
Rear wheels: Ø80 cm without brake
Ruote anteriori: Ø100 cm con freno
Ruote posteriori: Ø80 cm senza freno

75°

Electric backrest
Schiena elettrica



Electric legrest
Gambe elettriche

90°



BASE CUSTOMIZATION

We provide a thermoformed ABS base, completely closed to prevent any infiltration of powders or liquids. It is a very hard material, scratch-proof resistant and easy-to-clean.

PERSONALIZZAZIONE BASE

Forniamo una base in ABS termoformato, completamente chiuso per evitare qualsiasi infiltrazione di polveri o liquidi. È un materiale molto duro, resistente ai graffi e facile da pulire.

MATTRESS CUSTOMIZATION

Nefos is the exclusive upholstery line by Lemi. The innovative material and its special finishing touch guarantee easy-cleaning and hygiene. Its extraordinary structural qualities will persist through the years. An incredibly elastic texture enhances the memory foam mattress softness and quality at its best.

PERSONALIZZAZIONE MATERASSO

Nefos è la linea di rivestimento esclusive di Lemi. L'innovativo materiale e il suo speciale tocco di finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le sue straordinarie qualità strutturali permangono nel corso degli anni. Una texture incredibilmente elastica migliora al massimo la morbidezza e la qualità del materasso in Memory Foam.

Available finishing for DREAMED ZAK MOVE
Finiture disponibili per DREAMED ZAK MOVE



Grey
Grigio

NEFOS COLORS

COLORI NEFOS

6	1155	1182	1957	6985	3962	2124
2146	1194	6986	64	71	2173	1388
667	680	569	1843	1868	6942	6941
5946	6940	4942	1305	991	8009	8019



The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual finish of the product, particularly when viewed through a screen. Therefore, the **SELECTION OF THE MATTRESS FABRICS** must take place **AFTER CONSULTING** the **PHYSICAL SAMPLES** in the **NEFOS COLOR CHART**.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare la finitura reale del prodotto, in particolare se visualizzate attraverso uno schermo. Pertanto la **SELEZIONE DEI RIVESTIMENTI DEI MATERASSI** deve avvenire **PREVIA CONSULTAZIONE** della **CAMPIONATURA FISICA** nella **CARTELLA COLORI NEFOS**.

ACCESSORIES UPON REQUEST ACCESSORI SU RICHIESTA

All Medical chairs have a standard setting customizable upon request.
Tutte le poltrone Medicali hanno una configurazione standard personalizzabile su richiesta.



Wireless foot pedal control
(NO foot pedal with cable NO remote control)
Pedaliera wireless (NON compatibile con il pedale a filo e con la pulsantiera)



Handset control
Pulsantiera



I.V. Rod
(fixed with rotatable clamp and guides on the back)
Asta portaflebo
(da fissare con morsetto girevole e guide schiena)



Seat guide couple
Coppia guide seduta



Fixed clamps couple
Coppia morsetti fissi



Rotatable clamps couple
Coppia morsetti girevoli




Medical armrest couple (to be fixed with rotatable clamp and guides on the back)
Coppia braccioli medicali
(da fissare con morsetti girevoli e guide schiena)



Anto head rest for hair transplantation
(only for Zak and Bi-Zak)
Testa Anto per trapianto capelli
(solo per Zak e Bi-Zak)



Strip head rest with face hole
Testa strip con foro viso

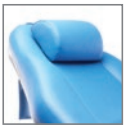

Headrest
Poggiatesta



Ophthalmological headrest
Testa oftalmologica



Roll Holder (66 cm)
Roll Holder (75 cm) for XL mattress
Portarotolo (66 cm)
Portarotolo (75 cm) per materassi XL




Blood sample taking armrest couple (fixed with flx clamp and guides on the seat)
Coppia braccioli da prelievo con snodo (da fissare con morsetto fisso e guide seduta)



Heel support couple
(fixed with flx clamp and guides on the seat)
Coppia reggitallone
(da fissare con morsetti fissi e guide sulla seduta)



Thigh supports couple
(fixed with flx clamp and guides on the seat)
Coppia reggicoscce con snodo
(da fissare con morsetti fissi e guide seduta)

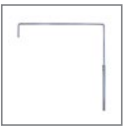

Curtain holder
(fixed with rotatable clamp and guides on the back)
Reggitelo
(da fissare con morsetto girevole e guide schiena)



Plastic leg protection
Proteggi gambe in plastica



Inox tray with support (fixed with flx clamp and guides on the seat)
Vassoio inox completo di telaio (da fissare con morsetto fisso e guide seduta)



UK cable
Cavo UK



Australian cable
Cavo Australia



Customization with logo
Personalizzazione con logo

TECHNICAL REQUIREMENTS CARATTERISTICHE TECNICHE

ELECTRIC REQUIREMENTS / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

VOLTAGE VOLTAGGIO	FREQUENCY FREQUENZA	ABSORPTION ASSORBIMENTO	TRANSFORMER TRASFORMATORE	PROTECTION RATING GRADO DI PROTEZIONE	ELECTRIC SYSTEM CONFORMS TO CEI NORMS IMPIANTO ELETTRICO a norme CEI	CONTROL BOX CENTRALINA
230/110V ac	50/60 Hz	0,7 - 1 A max	130 Va	IP 54	4	class II classe II

TECHNICAL SPECIFICATION / SPECIFICHE TECNICHE

MINIMUM HEIGHT: 52 CM / 21"

MAXIMUM HEIGHT : 82 CM / 33"

ANGLE OF INCLINATION TRENDELENBURG: 30°

ANGLE OF INCLINATION BACK REST: 75°

ANGLE OF INCLINATION LEG REST: 90°

MATTRESS LENGTH: 157 CM / 62"

MATTRESS LENGTH (WITH EXTENDED LEGREST): 187 CM / 74"

MATTRESS WIDTH: 58 CM / 23"

LATEX-FREE, NON-TOXIC AND NON-CARCINOGENIC MATERIALS

FIRE-RESISTANT UPHOLSTERY : UNI 9175 CLASS I M

ALTEZZA MINIMA: 52

ALTEZZA MASSIMA: 82

ANGOLO INCLINAZIONE TRENDELENBURG: 30°

ANGOLO INCLINAZIONE SCHIENA: 75°

ANGOLO INCLINAZIONE GAMBE: 90°

LUNGHEZZA MATERASSO: 157 CM

LUNGHEZZA MATERASSO (GAMBE ESTESE): 187 CM

LARGHEZZA MATERASSO: 58 CM

MATERIALI PRIVI DI LATTICE, ATOSSICI E NON CANCEROGENI

RIVESTIMENTO IGNIFUGO: UNI 9175 CLASS I M

WARRANTY / GARANZIA

STRUCTURE: 10 YEARS

MOTORS AND CONTROL: 2 YEARS

CUSHION: 5 YEARS

STRUTTURA: 10 ANNI

MOTORI E CONTROLLI: 2 ANNI

MATERASSO: 5 ANNI



LEMI MATTRESSES

The MATTRESSES of the LEMI MEDICAL line are made with the best quality materials to ensure maximum comfort for both the patient and the doctor.

MATERASSI LEMI

I MATERASSI della linea MEDICALE LEMI sono realizzati con materiali della migliore qualità per garantire il massimo comfort sia per il paziente che per il medico.

DREAMED

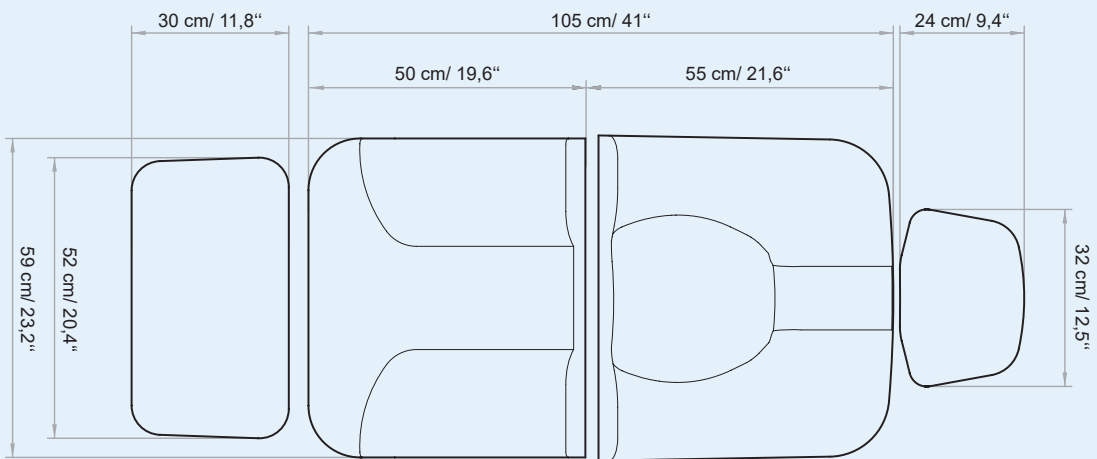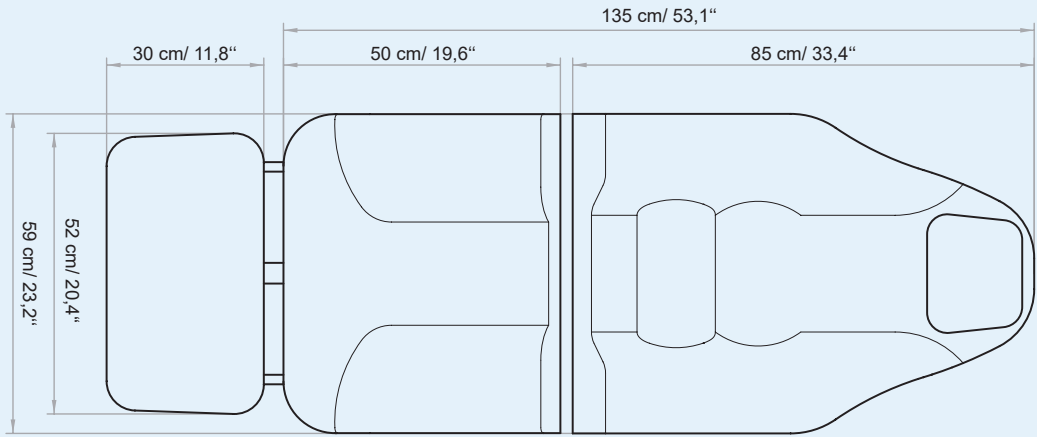

DREAMED ZAK



THICKNESS
SPESSORE
9cm | 3,5"



THICKNESS
SPESSORE
9cm | 3,5"

REGULATIONS

All Equipment is  marked

Electrical equipment and beds

Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations
Directive 2014/30/UE (Electromagnetic Compatibility Directive) and national regulations.

Hydraulic equipment and beds

Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations

Images

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the product.

NORME

Tutte le attrezzature sono a marchio 

Attrezzature e lettini elettrici

Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione
Direttiva 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità elettromagnetica) e disposizioni nazionali di attuazione.

Attrezzature e lettini idraulici

Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione

Immagini

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine reale del prodotto.

Lemi[®]
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT

Brusaferri & C srl

Via Mara Maretti Soldi, 13
26011 Casalbuttano (CREMONA) ITALY
Phone +39-0374-363069 Fax +39-0374-363071
info@lemigroup.it service@lemigroup.it

www.lemigroup.it