




Productos de Higiene y Seguridad



#30AñosCuidandoDeTi



**Coronavirus
COVID-19**

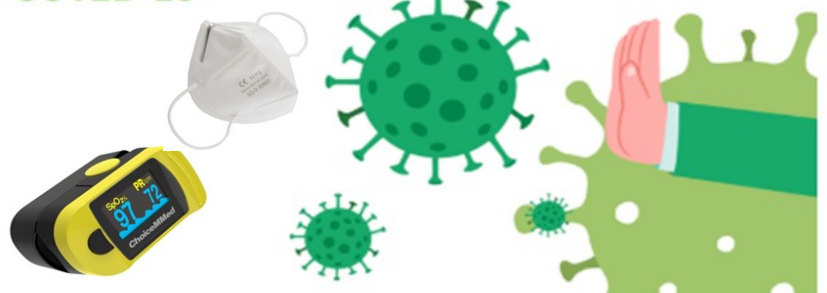



Mascarilla Quirúrgica Type II BFE>98%



Mascarilla higiénica no estéril Type II PREMIUM de alto nivel de protección BFE>98%. Confortable con gomas libres de látex para sujeción de forma segura alrededor de los oídos del portador.

- Alta eficacia de filtración bacteriana (EFB) >98%
- Presión diferencial (Resistencia a la Respiración) <40 Pa/cm²
- Limpieza antimicrobiana <30 ufc/g

Standard de Calidad: EN14683 Type II ; CE Mark

Clasificación: Producto Sanitario Clase I según MDD 93/42/EEC
Materiales (Libres 100% de látex)

Capa externa TST 28gr/m²

Capa intermedia MELT BLOWN FILTER 25gr/m²

Capa interna TST 25gr/m²

Medidas y sujeción: 17,5 * 9,5 cm. Gomas libres de látex soldadas por ultrasonidos al cuerpo de la mascarilla.

Mascarilla Protección Banuo B-KN95 FFP2>95%



Mascarilla de Protección Banuo B-KN95 tipo FFP2 con una tasa de filtración >95%. Uniones efectuadas por soldadura ultrasónica libres de cualquier tipo de cola o adhesivo. Libre de olores. Fabricada en cinco capas de las cuales dos son material "MELTBLOWN" que proporcionan el nivel de filtración exigido.

Mascarilla 100% acreditada bajo Normativa Europea de EPI's 2016/425.

Se facilita Certificado CE de Tipo a quien lo solicite.

- Eficacia de filtración bacteriana (EFB) >95%
- Presión diferencial (Resistencia a la Respiración) <2,4 mbar
- Clip de ajuste nasal
- Tiras de sujeción a orejas
- Color blanco

Embalaje: Caja de 20 unidades

Calidad del Producto*

Standard de Calidad: EN149:2001 +A1:2009

Clasificación: EPI según EU 2016/425

Certificado de Tipo: ICR Polska 6301328. Válido hasta 18 de Marzo de 2.025

Organismo Notificado: CE2703



Guantes protección Nitrilo



Guantes de Nitrilo no estériles, sin polvo, resistentes a la permeabilidad de una amplia gama de productos químicos.

Es un guante ideal para uso en centros geriátricos, centros hospitalarios,...

AQL 1.5

Aptos para uso Alimentario

Guante de un solo uso

Guantes de protección Vinilo



Estos guantes desechables de vinilo son una alternativa para las personas que presentan una alergia al látex.

El puño está enrollado para evitar que entre cualquier líquido.

No contienen polvo en el interior, estos guantes son ideales en ambientes médicos, minimizan la contaminación por partículas.

Descubre nuestra gama completa de Guantes desechables .

La protección de las manos es una protección individual que debe atraer toda su atención.

La elección de guantes debe responder a ciertas necesidades y a ciertas normas.

La legislación Europea impone indicar claramente un nivel de resistencia de los guantes de protección contra los llamados riesgos "mecánicos" (daños físicos y mecánicos por abrasión, corte, perforación y desgarramiento), lo que llamamos la norma EN 388.

Gorro Enfermera Circular



Gorro desechable para enfermera. Compuesto por una pieza circular de tela sin tejer que lleva cosida en toda su longitud un elástico, lo cual le permite una buena sujeción al cuero cabelludo sin comprimirlo, garantizando su comodidad de uso.

Características:

Gorro desechable para enfermera.

Material del gorro: tela sin tejer

Composición: Polipropileno 100% tipo spunbonded 14 g. Libre de látex.

Color: Verde

Diámetro: 50 cm

Elástico relajado: 39 a 49 cm



Calzas desechables Plástico



De polietileno

Con gomas elásticas

Talla única

Medidas: 40 cm de largo x 20 cm de ancho

Espesor 0.2 mm

Marcado Ce

Calzas Polipropileno Desechable



Calzas cubrezapatos, fabricadas en tela sin tejer. La composición del tejido le permite una buena transpiración. Incorporan un elástico en la apertura de la misma para una buena fijación al tobillo.

Características:

No estéril.

Composición: Tela sin tejer Polipropileno 100% de 20 g/m².

Color: Verde.

Dimensiones:

Largo total 38 +/- 1 cm

Altura 17 +/- 1 cm

Elástico relajado 12 cm +/- 1 cm.

Bata Lavable Verde AQUA PVC



Bata lavable modelo AQUA con acabado en PVC resistente hasta 100 lavados. Idóneo para organizaciones que requieran protección en sus labores y a la vez deseen mantener sus costes en productos desechables y contribuir al sostenimiento ambiental.

Confección con trasera cruzada para garantizar que la espalda quede cubierta. Cierre trasero con sujeción mediante cintas en cuello, cinturón en cintura y gomas en muñeca.

Composición: 82% PVC | 18% Polyester

Ajuste alrededor de la muñeca: goma + velcro

Cierre cintura: goma + velcro

Talla única de medida: aprox. 111cm.largo x 68cm.ancho

Peso: 250gr.

Color: verde



Bata de Trabajo Reutilizable PVC



Protección personal contra enfermedades infecciosas

Con gomas elásticas

Talla única

Medidas: 40 cm de largo x 20 cm de ancho

Espesor 0.2 mm

Marcado Ce

Bata Esterilizable Reutilizable



Talla única

Composición: SANIBUR ABF PL 40%pes - 60%PU

Gramaje 150 gr/m2. +/-5%

Transpirabilidad 1000gr/m2 24horas

Parte interior recubierta de poliuretano inducido térmicamente dentro de la cara posterior del poliéster.

Micro poroso, transpirable, impermeable, anti-alérgico, reciclable, Ignifugo y ecológico

Características ignifugas M1 UNE23723-90 EN ISO12952:1998 partes

1-2-3-4

Esterilización en autoclave a 120º

Antibacterias-fungicida ISO 846:1997

Temperatura máxima de lavado recomendada 96º.

Encogimiento al lavado a 95ºC 1 ciclo, urdimbre <2%, trama <4%

Resistencia a la rotura por tracción Urdimbre / Trama UNE-EN ISO 13934-1:1999

Solidez de las tinturas al frote UNE-EN ISO 105-X12:2003

Solidez de las tinturas al lavado UNE-EN ISO 105-C06:1997+AC2009

Lavado:

Resiste unos 300 lavados a temperatura de 90ºC.

Temperatura máxima de secado recomendado 60ºC.

Tiempo máximo de secado 6-8 minutos, sobrepasar estos tiempos puede dañar el poliuretano





Cubre-gafas protección



Gafa ocular de policarbonato.

Anti ralladura y anti empañante.

Compatible con la mayoría de gafas graduadas.

38 Gramos, super ligera.

Excelente calidad óptica.

Normativas: EN166 Protección individual de los ojos. Requisitos generales.

EN170 Protección ocular. Filtros ultravioletas (UV)

Gafas de Protección Policarbonato



Gafas de protección SEASUN SL-60 tipo GOGGLE para sellado de la zona ocular con el fin de evitar salpicaduras y aerosoles. La vía de transmisión del virus entre humanos se produce a través de las secreciones, aerosoles respiratorios o saliva de personas infectadas al entrar en contacto con mucosas de boca, nariz u ojos.

Material: Montura de PVC / Lente de policarbonato / Goma elástica

Certificado: ANSI Z87.1-2003


Norma: EN166:2001

Directiva: CE 2016/425 de Equipos de Protección Individual

Pantalla Facial Green ECO



Pantalla frontal de glasspack de 300 micras y diadema compuesta de protección P.V.C y elástico para sujeción pensada para la protección de todos los profesionales sanitarios, médicos, policías, bomberos y empresas de servicios y comercios que tengan que seguir con su actividad mientras dure la lucha contra la pandemia del coronavirus.

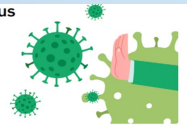

Pantalla Protección Facial Ligera



Máscara protectora con escudo de elevación, unida a la banda con tornillos con una perilla para ajustar el escudo de elevación.

La banda tiene dos correas de velcro, tanto en la parte posterior como en la parte superior de la cabeza, lo que permite un ajuste perfecto de la máscara a la cabeza.

El vidrio está hecho de PET transparente con alta transparencia, protegido con una lámina protectora retirada antes de su uso.

La correa tiene una espuma suave que permite un mejor ajuste y afecta la comodidad de uso.

Protectores Oculares Desechables



Todos los protectores oculares adheribles son cómodos y de fácil aplicación, permiten acceso a puente nasal, cejas y sienes, y también son hipoalergénicos y no contienen látex.

Utilizados en:

Tratamientos Láser

Tratamientos IPL

Tratamientos LED

Tratamientos Dermoabrasión

Caja 50 pares

Gafas Protectoras Unipersonales



No es un desechable – Es para uso individual - Certificado CE-Normativa EN207

1 Paciente / 1 Gafa

Novedosa línea de gafas de protección ocular destinadas para pacientes que se someten a aplicaciones láser IPL.

No tienen nada que ver con la de solarium, que son habitualmente utilizadas erróneamente en estos tratamientos.

Este producto está apoyado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y certificado acorde a la normativa CE-EN 207. El concepto de este producto en cuanto a uso es como el de la protección para UVA (aunque no tienen que ver nada técnicamente). Es decir, el usuario final (paciente) adquiere una para su uso personal. El centro se las vende o se las regala.

Rango: 350nm-3000nm


Material: Este nuevo producto lleva un recubrimiento metálico que las convierte en el equipo adecuado de protección para los pacientes

Higiene: cada paciente tiene sus protectores oculares intransferibles que trae a cada sesión. Evite contagios, hongos, eccemas,...

Seguridad: certificadas por la comunidad europea. Normativa EN 207 (normativa del láser)

Uso recomendado: 10-15 sesiones



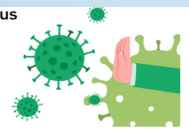

Gel limpiador higienizante de manos sin aclarado



Alta eficacia gracias a su 70% de ALCOHOL que asegura una adecuada y completa HIGIENIZACIÓN.D10

Acción inmediata.

Aplicar directamente en la piel y frotar hasta su completa absorción.

Enriquecido con glicerina de acción hidratante.

Presentación: 100 ml. , 500 ml. Y 5000 ml

Desinfectante para superficies



Testado independientemente siguiendo protocolos BSEN1276 Británicos y Europeos.

Eficaz frente a virus, bacterias, micobacterias y esporas, incluyendo MRSA, SIDA, Tuberculosis, Hepatitis B, Hepatitis C, Salmonella, Gripe Aviar (H5N1) y Gripe Porcina (H1N1).

Compatible con todo tipo de superficies, incluyendo plásticos, metales, acero inoxidable, sin dañarlos ni estropearlos; una rápida aplicación es todo lo que se necesita.

Diseñado para tratar con un solo producto todas las áreas del gabinete (sillón, encimera, escupidera, material rotatorio, etc..).

Formulado para evitar la irritación de la piel o sensibilidad inusual. Compatible con personas alérgicas a otros componentes.

Potente acción detergente.

Testado de forma independiente frente a otros productos líderes en Europa obteniendo los mejores resultados.



Spray Higienizante de Manos y Superficie



Envase aerosol 400 ml. Ø59x214

Protector Spray higienizante de manos y de superficies que se aplica a presión con spray.

Altamente eficaz en la desinfección del Covid-19 en manos y superficies.

Protector Spray manos: Limpia a fondo e higieniza las manos, sin necesidad de aclarar con agua, gracias al alcohol y a los tensoactivos que contiene en su composición. Mantener limpias las manos garantiza la protección de nuestro organismo. Cualquier momento es ideal para la utilización de spray apto para todo tipo de pieles, ya que se puede aplicar tantas veces como sea necesario a lo largo del día. Gracias a su composición, ejerce una triple acción: limpia en profundidad, hidrata y cuida la piel de las manos. Ayuda a evitar la propagación mediante una rápida higiene de manos estés donde estés.

Protector Spray superficies: Limpia a fondo e higieniza cualquier superficie, sin necesidad de aclarar con agua. Además, al aplicarse en spray garantiza un secado ultra rápido. Su fórmula sin aclarado es un higienizante y limpiador de alta eficiencia, adecuado para todo tipo de superficies: cocina, baño, superficies de plástico, cristales, muebles, etc. Combinan el poder de la limpieza con la máxima eficacia en la desinfección de virus y bacterias.

Toallitas Húmedas AZOMAX



Azomax pertenece una gama de desinfectantes y limpieza sin alcohol 2 en 1 que se utiliza en áreas de salud y no salud donde la prevención y el control de infecciones son fundamentales.

Azomax contiene una revolucionaria formulación patentada de Advanced Active Technology que contiene una mezcla de tensioactivos y 5 biocidas que incluyen compuestos de amonio cuaternario (QAC), bronopol y biguanida polimérica (PHMB), que se complementan entre sí para crear una poderosa limpieza 2 en 1 y desinfectante.

La toallita Azomax tiene una actividad de amplio espectro contra una gama de los 21 microorganismos más patógenos, incluidos E.Coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus, Enterococos, Mycobacterium terrae, MRSA, Hepatitis B, Hepatitis C, VIH, Vaccinia, Flaviviridae, Candida albicans, Norovirus, H1N1, Acinetobacter, Klebsiella pneumoniae, Listeria, Salmonella, Legionella y SARS Coronavirus.

Con actividad antimicrobiana residual durante 24 horas y tiempos de contacto rápidos de 5 minutos.



Gel limpiador higienizante de manos sin aclarado



Funcionamiento sencillo con un solo botón

Económico

Display SpO2, Pulso, Barra Pulso y Pletismograma

Diseñado para uso adulto y pediátrico

Alimentación: 2 pilas AAA

Bajo consumo, menos de 40mA

Autoapagado automático

Seis modos de visualización

Indicador de batería baja

Display dual color LED

Brillo del display ajustable en 10 niveles

Idóneo para autocontrol en domicilio

Tipos de paciente: adultos y niños

Compatibilidad Electromagnética

Según IEC60601-1-2 Clase B

Termómetro IR Sin Contacto



Termómetro sin contacto adecuado para la toma de temperatura en 1 segundo sin riesgo de contagios en bebés, niños y adultos. La pantalla dispone de retroiluminación automática en color ROJO - NARANJA - VERDE según temperatura medida.

.Alimentación: 2u. x AA (no incluidas)

.Medición sin contacto, utilizando un sistema de detección infrarrojo para medir con precisión

.Medición rápida de temperatura en 1 segundo

.Función de apagado automático en 5 segundos.

.Distancia medición: de 3 a 5 cm.

Rango de medición Corporal: 32,0C ~ 43,0C

Rango de medición Objetos: 0,0C ~ 60,0C

Rango de medición Ambiental: 0,0C ~ 40,0C

Exactitud: 0,3C

Tiempo de apagado automático: 5 segundos

Longevidad del producto: 100.000 mediciones

Peso: 131g



COMVAT DUO₃ es el nuevo sistema de desinfección combinado para hospitales, clínicas, consultas médicas, residencias y otros espacios sanitarios que requieran reforzar sus procesos de desinfección y su estrategia de **inactivación de la Covid-19**.




Covid-19

Las salas de aislamiento de los hospitales se han convertido temporalmente en salas potencialmente infecciosas. Mediante la desinfección del ambiente y fómites, se refuerza la prevención, y con la inactivación del virus, se rompe la cadena de transmisión.

Una problemática permanente

Múltiples estudios han demostrado que **menos del 50% de las superficies** de las habitaciones de los hospitales se limpian y desinfectan adecuadamente cuando se usan germicidas químicos.¹

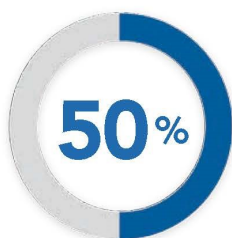

Métodos de limpieza automatizados

Los dispositivos automatizados para la desinfección de espacios mediante **luz germicida y/o ozono** han demostrado una **descontaminación superior** en superficies y objetos.²

¿Por qué reforzar el proceso de desinfección?

- Varios estudios demuestran que el riesgo de adquirir SARM, VRE, *Acinetobacter*, *Pseudomonas* o *C. difficile* se incrementa ante un nuevo ingreso en una habitación previamente ocupada por un paciente colonizado o infectado con uno de estos patógenos. Dichos patógenos pueden sobrevivir en las superficies durante días, lo que aumenta el riesgo de infección para los pacientes, **a menos que el proceso de limpieza los elimine.**²
- 3,8 millones de personas** adquieren cada año una infección asociada a la asistencia sanitaria en hospitales con cuidados intensivos en los países de la Unión Europea, según las estimaciones del **Centro Europeo para el Control de Enfermedades.**³
- En España, casi el **8% de pacientes** ha adquirido al menos una infección asociada a la asistencia sanitaria, porcentaje algo superior a la mediana Europea.³



Características técnicas



SOFTWARE

- El software permite conocer la **dosis de luz necesaria** en función de las dimensiones de la estancia a tratar.
- Si es preciso sugiere **fraccionar la sala** en dos o más áreas de tratamiento.
- Informa del **tiempo de aplicación** restante.
- **Mapa de salas** pre-configuradas específicamente para cada centro.



SEGURIDAD

- **Sensores de presencia.** COMVAT DUO₃ interrumpe el tratamiento inmediatamente si detecta un movimiento a su alrededor.
- **Sensores de ozono.** Detector de ppm de O₃ en el ambiente. Controla en todo momento los niveles de ozono para permitir la entrada sin riesgos del personal sanitario y de limpieza después del tratamiento.
- **Semáforo tricolor.** COMVAT DUO₃ Informa del estado de funcionamiento mediante una luz roja, ámbar y verde.
- **Activación retardada.** Permite la salida del personal de desinfección antes del procedimiento.





Termómetro digital infrarrojo iHealth PT3



- Sensor por infrarrojos ultrasensible de alta precisión; mide la temperatura emitida por la frente y recolecta datos de más de 100 puntos por segundo.
- Medición rápida de la temperatura en solo 1 segundo; resultados instantáneos.
- Diseño sin contacto para una medición más segura e higiénica.
- Vibración suave para alertar cuando se completa la lectura; sin molestos pitidos.
- Funcionamiento sencillo en solo tres pasos.
- Pantalla de gran tamaño, legible también de noche gracias a la retroiluminación LED.
- Además de termómetro, incluye un sensor de distancia para evitar mediciones no válidas, así como un sensor de temperatura ambiental para realizar los ajustes necesarios y ofrecer una medición precisa.
- Pantalla Tamaño: 0.75"
- Retroiluminación: LED
- Posicionamiento de medición: Centro de la frente
- Distancia: Menos de 3 cm
- Temperatura en °C o en °F
- Precisión: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.4^{\circ}\text{F}$)
- Rango de medición: 32°C - 42.9°C (89.6°F - 109.2°F)
- Visualización de temperatura oral equivalente Resolución: 0.1°C (0.1°F)
- Alimentación: Dos pilas AAA (No incluidas)
- Dimensiones: 137 x 34 x 39 mm
- Peso: 90 g

Cañón de Ozono



Equipo ideal para proceder a la desinfección y desodorización de habitaciones, vehículos, bares, e infinidad de espacios cerrados.

Siempre ha de ser usado sin presencia de personas, animales o plantas por su gran cantidad de producción de ozono.

Una vez realizada la desinfección es conveniente airear la habitación o vehículo, o dejar pasar varias horas para que el ozono vuelva a convertirse de nuevo en oxígeno.

Modo de acción

El ozono es un desinfectante universal que reacciona con los elementos contaminantes, oxidándolos, eliminando el color y olor a la vez que destruye hongos, bacterias, virus y algas. La acción desodorizante (sin camuflar el olor) es por efecto de la oxidación de las moléculas o compuestos químicos como las cetonas, hidrocarburos, ácidos, derivados del azufre y nitrogenados, etc. El ozono oxida la pared celular, rompiéndola y atacando a los constituyentes de los ácidos nucleicos (ADN y ARN). Por ello, los microorganismos no son capaces de desarrollar inmunidad al ozono como lo hacen frente a otros compuestos.