#### **MEDICAL**

# DENTAMED



#### COD. 340 G DREAM

Dentamed is ideal for diagnostics, ENT, dental and ophthalmic examinations. Different headrest options upon request. Thanks to its low minimum height the Dentamed can easily accommodate the patient. The back shape is specifically designed to approach the patient face and legs can be bent up to 90°. Different headrest options upon request.


Dentamed è l'ideale per esami diagnostici, otorinolaringoiatria, dentale e oftalmologia. Diverse opzioni di poggiatesta su richiesta. Grazie alla sua particolare altezza minima Dentamed permette al paziente di accomodarsi facilmente.

La forma dello schienale è specificamente progettata per avvicinarsi al viso del paziente e le gambe possono essere piegate fino a 90°.

Teste differenti su richiesta.

#### Focus on

- 4 electric motors for height, backrest, legrest and trendelenburg adjustment
- Pedal control with automatic reset function
- Entirely enclosed in ABS covering
- "Easy-to-clean" mattress without stitches
- Wide selection of class 1IM fire-resistant coverings
- Standard version including: anatomic mattress without stitches, small zak headrest, back guides couple, 180° rotation
- 4 motori elettrici per la regolazione completa di altezza, schiena, gambe e trendelenburg
- Pedaliera con azzeramento automatico
- Carter in ABS completamente chiuso
- Materasso senza cuciture "easy-to-clean"
- Ampia scelta di rivestimenti ignifughi classe 1IM
- La versione standard include: materasso anatomico senza cuciture, testa zak piccola, coppia guide schienale, rotazione 180°

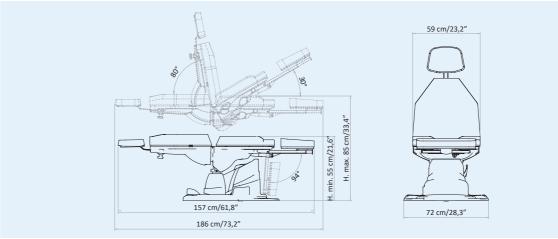





## **MOVEMENTS**

4 independent electric movements: height, backrest, legrest, trendelenburgh 1 synchronized electric movement: backrest/legrest (only with handset) 2 manual movements: head and legrest extension Automatic reset control to bring the couch back to the base position 180° Chair rotation



Easy-to-clean anatomic mattress without stitching Materasso anatomico senza cuciture per una facile igienizzazione



Electric Trendelenburg Trendelenburg elettrico



90° rotation on both sides Rotazione 90° da entrambi i lati



## **MOVIMENTI**

4 movimenti elettrici indipendenti: altezza, schiena, gambe, trendelenburg 1 movimento elettrico sincronizzato: schiena/gambe (solo con pulsantiera) 2 movimenti manuali: testa ed estensione gambe Comando di azzeramento automatico che riporta la poltrona nella posizione base Rotazione poltrona 180°



90° adjustable legs Gambe regolabili a 90°







## BASE CUSTOMIZATION

We provide a thermoformed ABS base, completely closed to prevent any infiltration of powders or liquids. It is a very hard material, scratch-proof resistant and easy-to-clean.

#### PERSONALIZZAZIONE BASE

Forniamo una base in ABS termoformato, completamente chiuso per evitare qualsiasi infiltrazione di polveri o liquidi. È un materiale molto duro, resistente ai graffi e facile da pulire.

## Available finishing for DENTAMED Finiture disponibili per DENTAMED



*Grey* Grigio

#### MATTRESS CUSTOMIZATION

Nefos is the exclusive upholstery line by Lemi. The innovative material and its special finishing touch guarantee easy-cleaning and hygiene. Its extraordinary structural qualities will persist through the years. An incredibly elastic texture enhances the memory foam mattress softness and quality at its best

### PERSONALIZZAZIONE MATERASSO

Nefos è la linea di rivestimento esclusive di Lemi. L'innovativo materiale e il suo speciale tocco di finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le sue straordinarie qualità strutturali permangono nel corso degli anni. Una texture incredibilmente elastica migliora al massimo la morbidezza e la qualità del materasso in Memory Foam.

#### NEFOS COLORS COLORI NEFOS





The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual finish of the product, particularly when viewed through a screen. Therefore, the **SELECTION OF THE MATTRESS FABRICS** must take place **AFTER CONSULTING** the **PHYSICAL SAMPLES** in the **NEFOS COLOR CHART**.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare la finitura reale del prodotto, in particolare se visualizzate attraverso uno schermo. Pertanto la <u>SELEZIONE DEI RIVESTIMENTI DEI MATERASSI</u> deve avvenire <u>PREVIA CONSULTAZIONE</u> della <u>CAMPIONATURA FISICA</u> nella <u>CARTELLA COLORI NEFOS</u>.

# ACCESSORIES UPON REQUEST ACCESSORI SU RICHIESTA

All Medical chairs have a standard setting customizable upon request.

Tutte le poltrone Medicali hanno una configurazione standard personalizzabile su richiesta.



Wireless foot pedal control (NO foot pedal with cable NO remote control) Pedaliera wireless (NON compatibile con il pedale a filo e con la pulsantiera)



Roll Holder (66 cm)
Roll Holder (75 cm) for XL mattress
Portarotolo (66 cm)
Portarotolo (75 cm) per materassi XL

re con morsetto fisso e guide seduta)



Hanset control
Pulsantiera



Blood sample taking armrest couple (fixed with flx clamp and guides on the seat)

Coppia braccioli da prelievo con snodo (da fissa-



I.V. Rod
(fixed with rotatable clamp and guides on the back)
Asta portaflebo
(da fissare con morsetto girevole e guide schiena)



Heel support couple (fixed with flx clamp and guides on the seat) Coppia reggitallone (da fissare con morsetti fissi e guide sulla seduta)



Seat guide couple Coppia guide seduta



Thigh supports couple
(fixed with flx clamp and guides on the seat)
Coppia reggicosce con snodo
(da fissare con morsetti fissi e guide seduta)



Fixed clamps couple Coppia morsetti fissi



Curtain holder
(fixed with rotatable clamp and guides on the back)
Reggitelo
(da fissare con morsetto girevole e guide schiena)



Rotatable clamps couple Coppia morsetti girevoli



Plastic leg protection
Proteggi gambe in plastica



clamp and guides on the back)
Coppia braccioli medicali
(da fissare con morsetti girevoli e guide schiena)

Medical armrest couple (to be fixed with rotatable




Wheels with brake (ø 50mm) Ruote con freno (ø 50mm)



Anto head rest for hair transplantation (only for Zak and Bi-Zak) Testa Anto per trapianto capelli



Inox tray with support (fixed with flx clamp and guides on the seat)
Vassoio inox completo di telaio (da fissare con

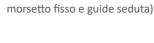



Strip head rest with face hole Testa strip con foro viso



UK cable Cavo UK



Headrest Poggiatesta



Australian cable Cavo Australia



Ophthalmological headrest Testa oftalmologica



Customization with logo
Personalizzazione con logo

# TECHNICAL REQUIREMENTS

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### ELECTRIC REQUIREMENTS / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

VOLTAGE VOLTAGGIO	FREQUENCY FREQUENZA	ABSORPTION ASSORBIMENTO	TRANSFORMER TRASFORMATORE	PROTECTION RATING GRADO DI PROTEZIONE	ELECTRIC SYSTEM CONFORMS TO CEI NORMS IMPIANTO ELETTRICO a norme CEI	CONTROL BOX CENTRALINA
230/110V ac	50/60 Hz	0,7 - 1 A max	120 Va	IP 54	4	class II

#### TECHNICAL SPECIFICATION / SPECIFICHE TECNICHE

MINIMUM HEIGHT: 53 CM / 21"

MAXIMUM HEIGHT: 83 CM / 33"

ANGOLO INCLINAZIONE TRENDELENBURG: 30°

ANGLE OF INCLINATION BACK REST: 80°

ANGLE OF INCLINATION LEG: 90

MATTRESS LENGTH: 157 CM / 62"

MATTRESS LENGTH WITH LEGREST: 187 CM / 74"

MATTRESS WIDTH: 58 CM / 23

ROTATION: 90° ON BOTH SIDES

LATEX-FREE, NON-TOXIC AND NON-CARCINOGENIC MATERIALS

FIRE-RESISTANT UPHOLSTERY: UNI 9175 CLASS I M

ALTEZZA MINIMA: 53 CM

ALTEZZA MASSIMA: 83 CM

ANGOLO INCLINAZIONE TRENDELENBURG: 30°

ANGOLO INCLINAZIONE SCHIENA: 80

ANGOLO INCLINAZIONE GAMBE: 90

LUNGHEZZA MATERASSO: 157 CM

LUNGHEZZA MATERASSO GAMBE ESTESE: 187 CM

LARGHEZZA MATERASSO: 58 CM

ROTAZIONE: 90° SU ENTRAMBI I LATI

MATERIALI PRIVI DI LATTICE, ATOSSICI E NON CANCEROGENI

RIVESTIMENTO IGNIFUGO: UNI 9175 CLASS I M

#### WARRANTY / GARANZIA

STRUCTURE: 10 YEARS

MOTORS AND CONTROL: 2 YEARS

CUSHION: 5 YEARS

STRUTTURA: 10 ANNI
MOTORI E CONTROLLI: 2 ANNI


MATERASSO: 5 ANNI

# LEMI MATTRESSES

The MATTRESSES of the LEMI MEDICAL line are made with the best quality materials to ensure maximum comfort for both the patient and the doctor.

## **MATERASSI LEMI**

I MATERASSI della linea MEDICALE LEMI sono realizzati con materiali della migliore qualità per garantire il massimo comfort sia per il paziente che per il medico.

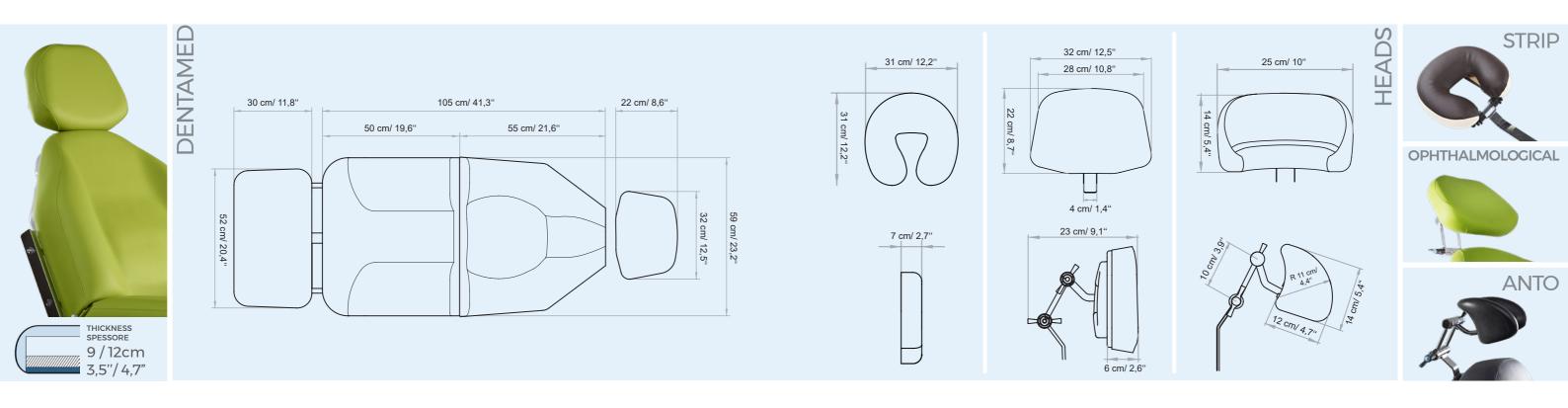

**REGULATIONS**All Equipment is **C** € marked

#### **Electrical equipment and beds**

Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations Directive 2014/30/UE (Electromagnetic Compatibility Directive) and national regulations.

#### Hydraulic equipment and beds

Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the product.

#### **NORME**

Tutte le attrezzature sono a marchio

#### Attrezzature e lettini elettrici

Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione Direttiva 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità elettromagnetica) e disposizioni nazionali di attuazione.

#### Attrezzature e lettini idraulici

Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine reale del prodotto.



#### Brusaferri & C srl

Via Mara Maretti Soldi, 13 26011 Casalbuttano (CREMONA) ITALY Phone +39-0374-363069 Fax +39-0374-363071 info@lemigroup.it service@lemigroup.it

www.lemigroup.it